


# eaSyGroin

## Sistema de Inmovilización de Pelvis & Abdomen

El sistema eaSyGroin emplea máscaras termoplásticas adaptadas para la inmovilización de pelvis y abdomen. Estas máscaras incluyen dos perfiles en L, que pueden indexarse en diferentes posiciones a los lados del paciente y ser asegurados mediante abrazaderas deslizantes. Además, incluyen un tercer perfil que se indexa en la zona inguinal mediante el mismo sistema. eaSyGroin facilita sustancialmente el reposicionamiento y la inmovilización de la zona pélvica, evitando rotaciones y reduciendo su desplazamiento cráneo-caudal.

El sistema de anclaje de perfiles en L permite la fijación de estos hasta en **3 posiciones en cada lateral** y hasta en **8 posiciones en la zona inguinal**. También incluye dos **reglas laterales visibles exteriormente y en las imágenes de CT**.

eaSyGroin es MR compatible (**MR condicional 3T**) e indexable mediante una o dos barras indexadoras y sus reducidas dimensiones permiten que pueda ser empleado en gantries de pequeñas dimensiones.

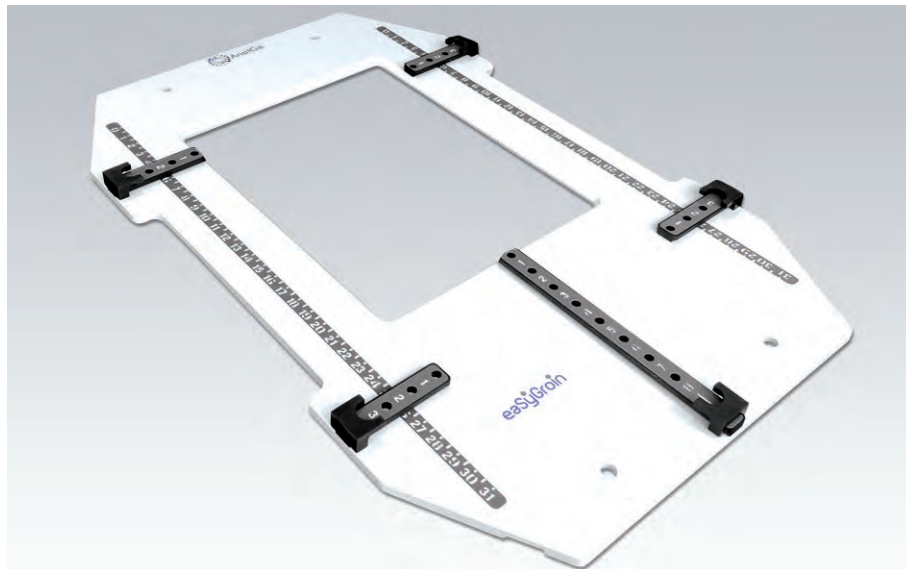

“eaSyGroin facilita sustancialmente el reposicionamiento y la inmovilización de la zona pélvica, evitando rotaciones y reduciendo su desplazamiento cráneo-caudal.”

Producto	Referencia
<b>Sistema de inmovilización</b>	
eaSyGroin	AG1001044
<b>Máscara compatible</b>	
Abdomen-pelvis eXaCast Mask, 2,4 mm thickness	AGP12224

